



# Hur du byter vaxfilter och domen

Med jämna mellanrum eller när du hör sämre med hörapparaterna

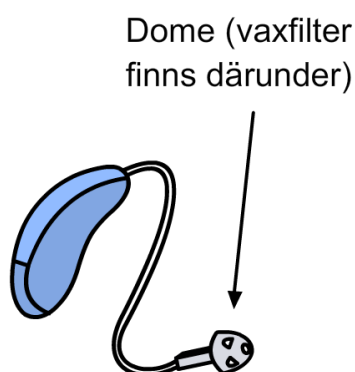


**Intro:** Vi ska ta av domen för att byta ett så kallat vaxfilter som finns därunder (se bild).


Håll i den grå delen, av metall, **inte** i sladden!

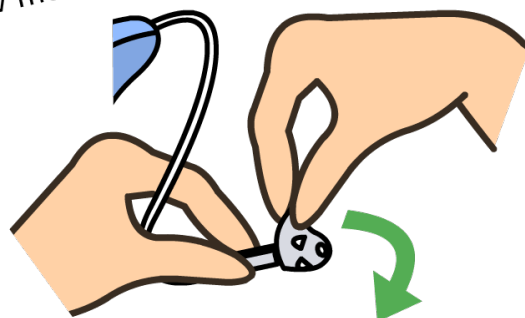


**1a.** Ta tag i domens "flärp". Dra sedan rakt ut och bänd loss åt sidan samtidigt. Om du inte får grepp om flärpen så prova steg 1b.

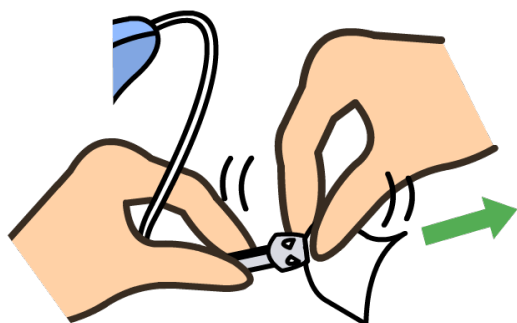

**1b.** Alternativt ta tag i tippet av domen. Ta tag med en bit papper om du glider. Lirka åt sidorna samtidigt som du drar rakt ut.

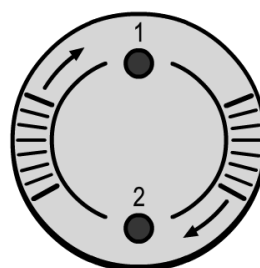

**2.** Ta fram en hållare med nya vaxfilter. Observera att hålen är numrerade 1 och 2.

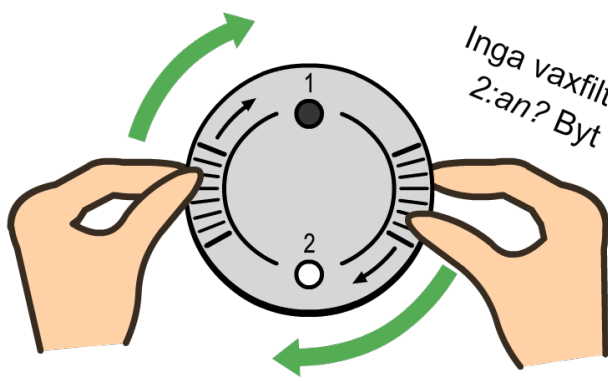



Inga vaxfilter finns kvar i 2:an? Byt vaxhållare!



**3a.** Håll försiktigt med tummarna på räfflorna som bilden visar utan att trycka. Avänd tummarna för att rotera medurs tills det är *tomt* i 1:an och *vaxfilter* (vit prick) i 2:an. Om du inte lyckas, prova 3b.


**3b.** Alternativt håll hållaren i ena handflatan. Håll försiktigt med pek- och långfinger på räfflorna som bilden visar utan att trycka. Avänd pek- och långfinger för att rotera medurs tills det är *tomt* i 1:an och *vaxfilter* (vit prick) i 2:an.

Håll i den gråa delen, av metall, **inte** i sladden!

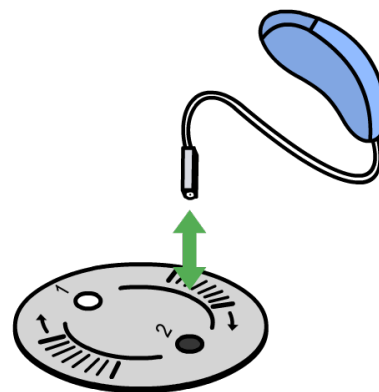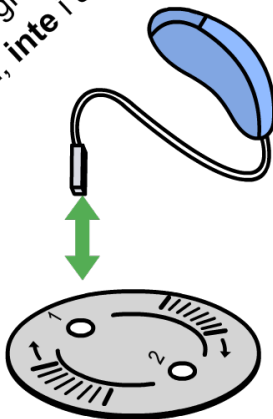

**4.** Tryck ner hörapparaten med gamla vaxfiltret i 1:an tills det säger "klick". Dra sedan upp igen. Det *gamla* vaxfiltret ska då sitta kvar i 1:an.

**5.** Gör samma sak som i föregående steg fast i 2:an. Det *nya* vaxfiltret ska då fastna på hörapparaten. Klart!

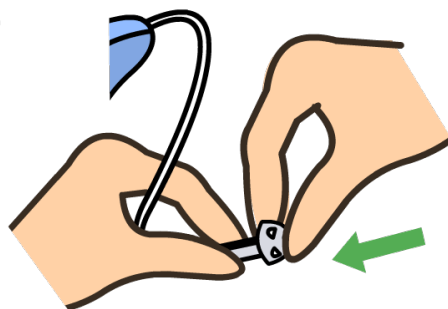

**6.** Byt dome om den är mer än 2 månader gammal. Tryck den ordentligt rakt in på hörapparaten. **Klart!**