


# Parkoppling

## Bluetooth Low energy

### Hörapparater och Android

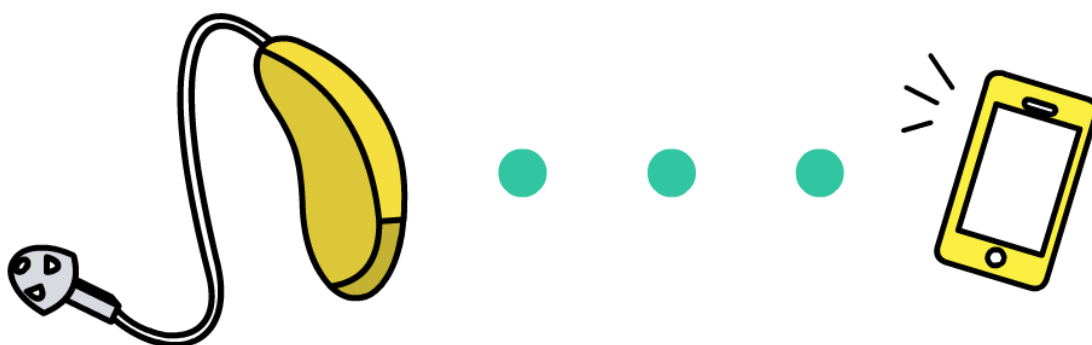


**OBS:** Det ser liknande ut på de flesta Android-telefoner. Det kan dock se lite annorlunda ut i din telefon jämfört med bilderna i denna bruksanvisning.


*Om du stöter på problem, ta hjälp av någon i din omgivning med telefonvana.*

# Parkoppla hörapparaterna med din Android


(för att kunna lyssna på ljud från t.ex. telefonsamtal och musikprogram)

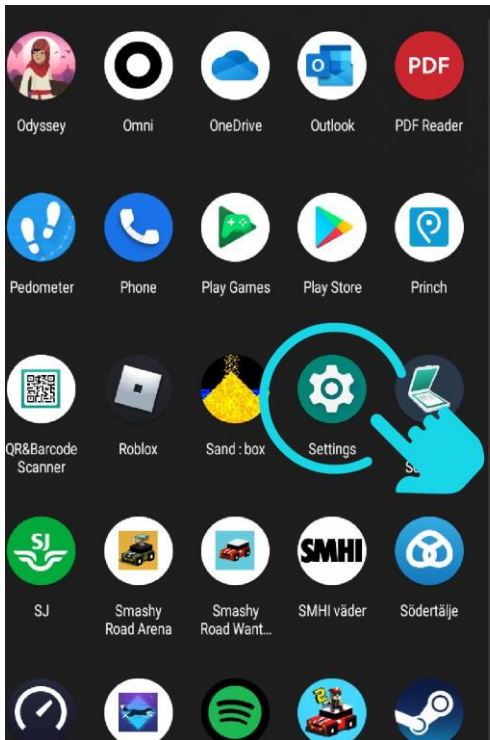

1. Hitta och tryck på "Inställningar".  
Ibland kan du behöva "swipa" nedifrån och upp för att hitta den.

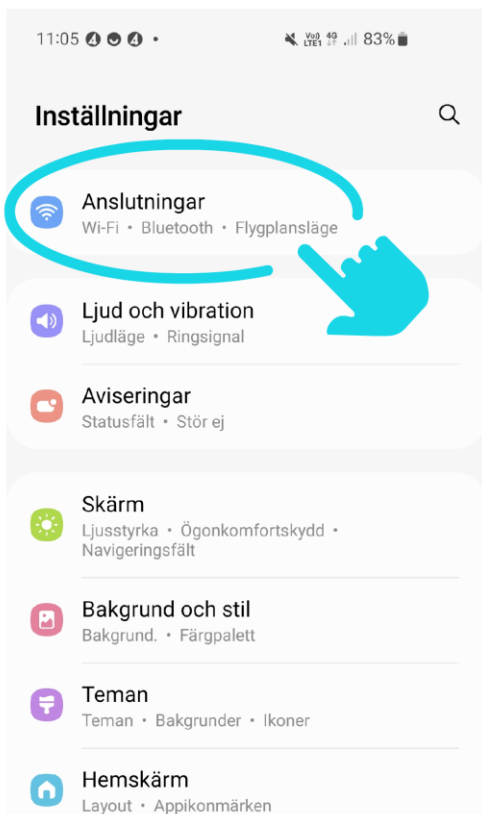


2. Om inte "Bluetooth" ligger synligt i första menyraden - tryck först på "Anslutningar" och sedan på "Bluetooth".

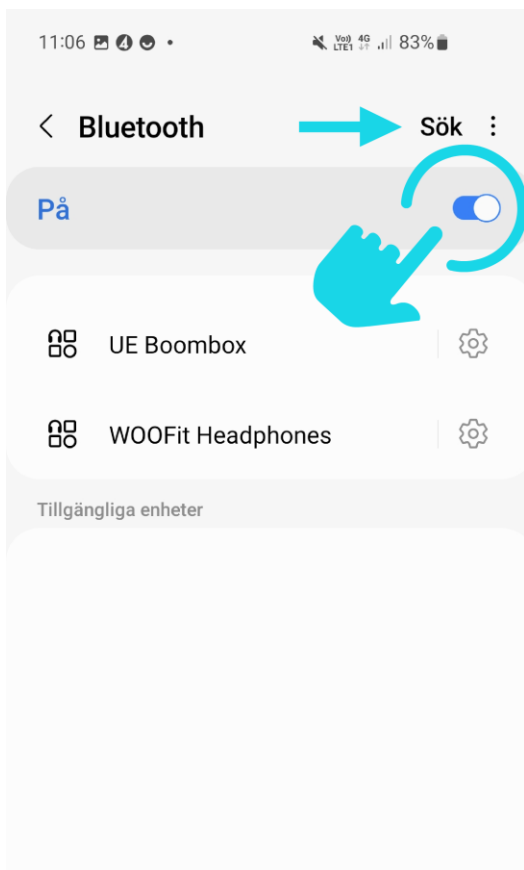


3. Slå på bluetooth om den inte redan är på. Tryck sedan på "Sök".


Medan telefonen söker så ska du starta om hörapparaterna. Det gör du genom att ta dem i och ur laddaren om de är uppladdningsbara. Annars öppna och stäng batteriluckorna.

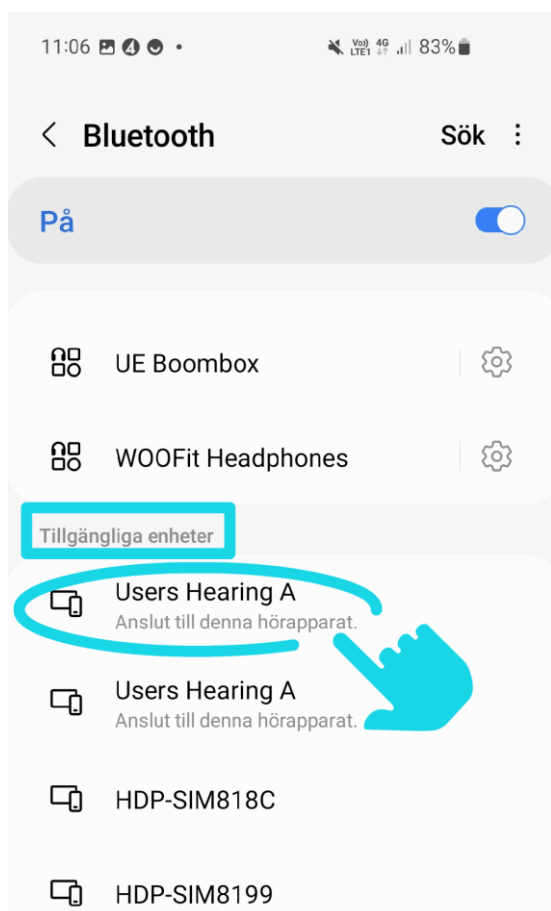

4. Hörapparaterna ska dyka upp under "Tillgängliga enheter" (t.ex. här är det två enheter som båda heter "Users Hearing A"). Tryck på var och en för att parkoppla.

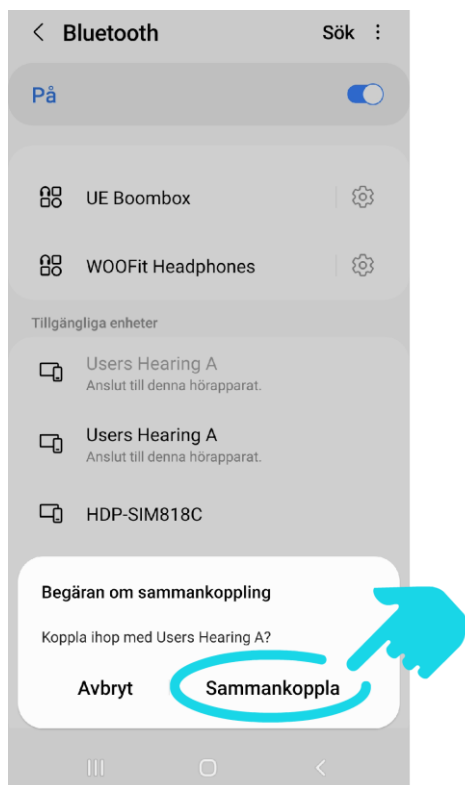

5. Tryck på  
”sammankoppla”.

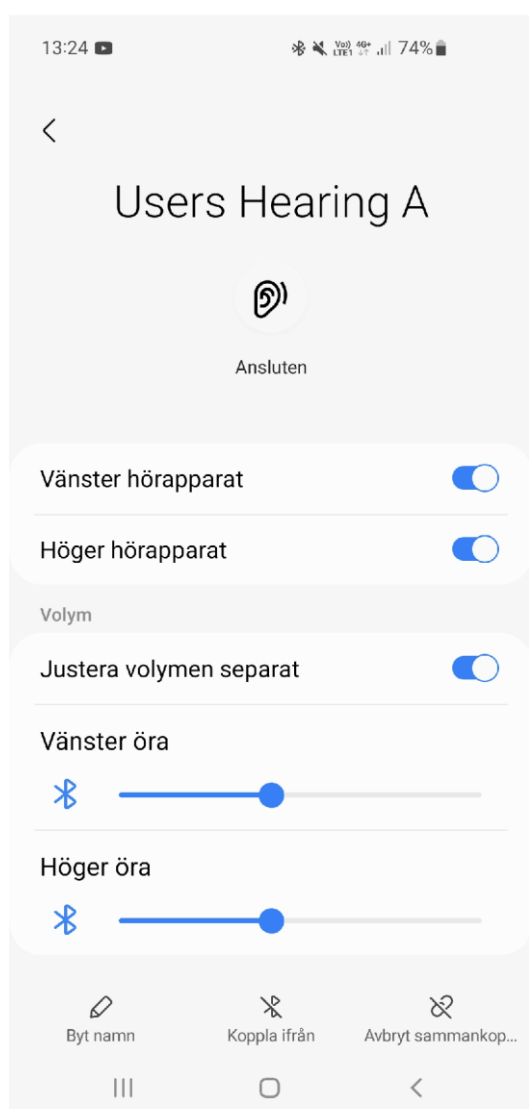


6. Om allt gått rätt till ska  
hörapparaterna hamna  
under listan för  
sammankopplade  
enheter. Klart!


Om du klickar på dina  
hörapparater i listan kommer  
en ny vy upp (se bild till  
vänster). Här kan du t.ex.  
justera volymen på dina  
hörapparater. Det kan dock  
vara smidigare att ladda ner  
en app för att göra detta (se  
nästa sida).

## Ladda ner app på din Android


(för att kunna styra inställningar i hörapparaterna,  
t.ex. öka och sänka volymen)

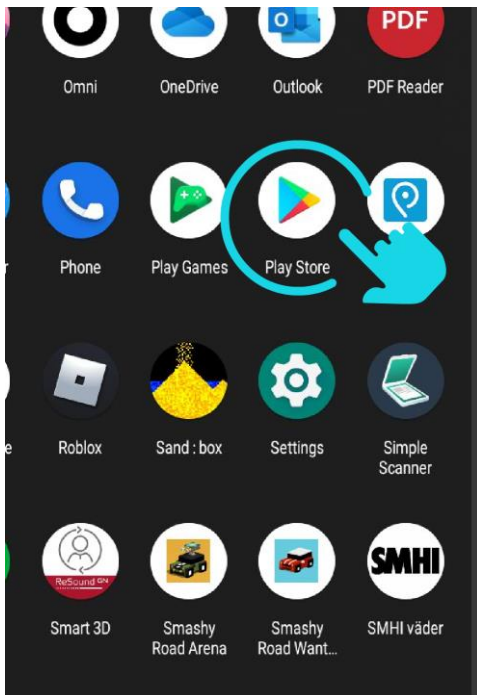


1. Hitta och tryck på  
"Play butik" eller  
"Google play".

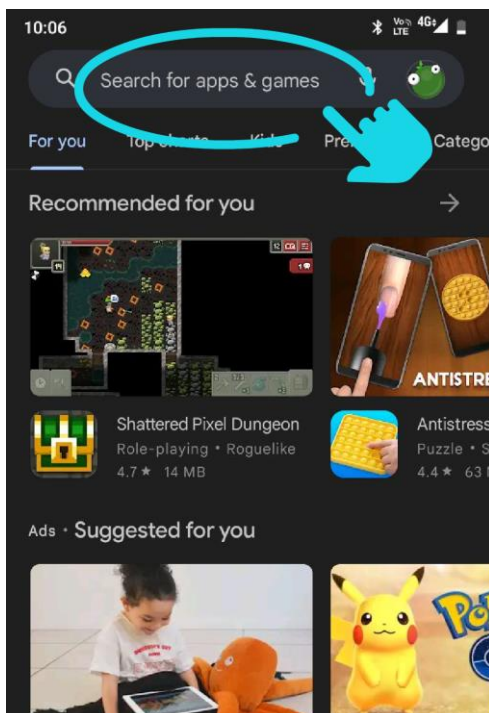

2. Tryck på sökfältet  
längst upp. Sök efter  
namnet på appen som  
hör till just dina  
hörapparater (det finns  
olika appar för olika  
hörapparatsmodeller).

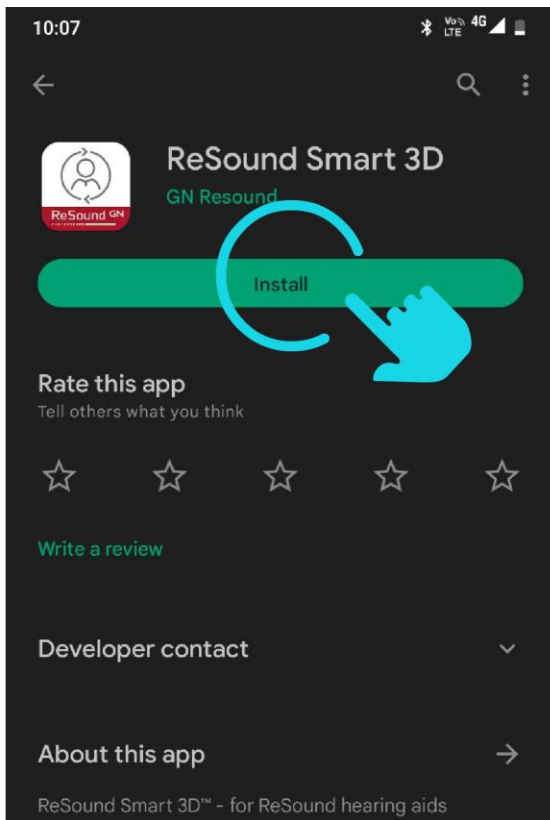

3. Om det kommer upp flera förslag i listan får du hitta och klicka på den rätta appen (observera att den rätta appen inte nödvändigtvis är den från denna bilden). Klicka sedan på "installera".

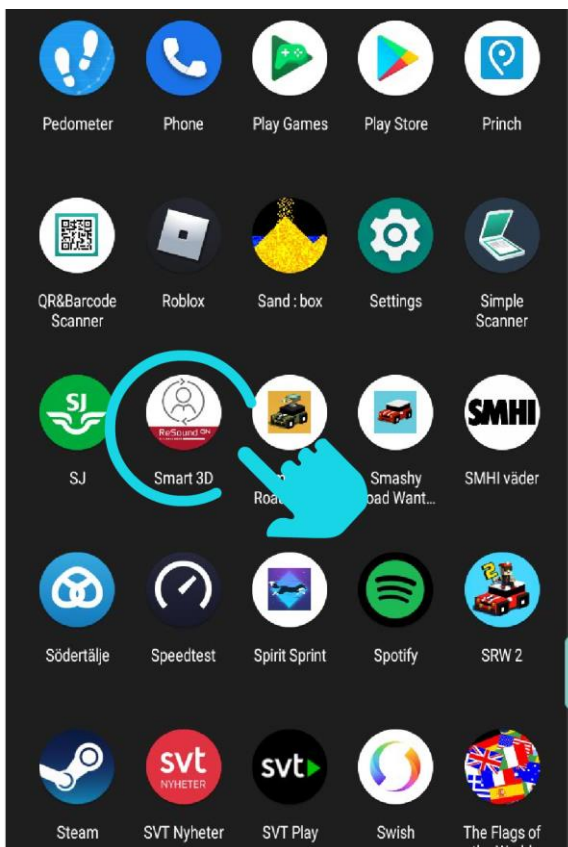


4. Hitta hörapparatsappen bland dina andra appar. När du öppnat appen följer du instruktionen för hur du kopplar appen till dina hörapparater. Klart!

## Om något inte fungerar

(t.ex. om det inte kommer ljud upp i hörapparaterna eller att de inte hittas i appen)

- Starta om hörapparaterna och telefonen.
- Se till att ha senaste uppdateringen av operativsystemet.
- Prova att avbryta sammankopplingen till hörapparaterna (se bilden nedan som kommer från bild på sid 3) och gör sedan om parkopplingen.
- Prova att ta bort parkopplingar till andra enheter som du ändå inte använder.

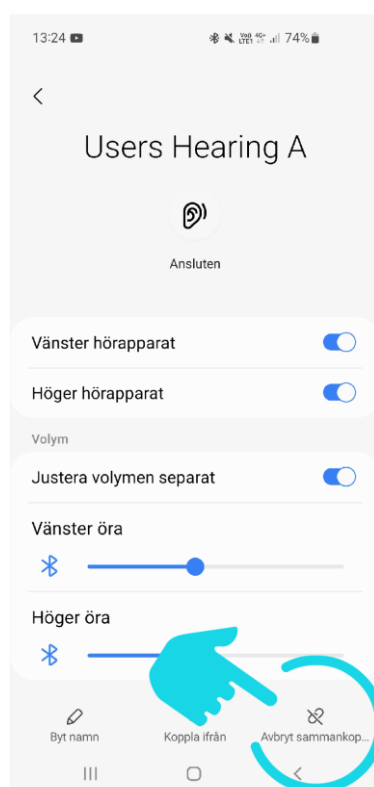



Erik Nästesjö Todd  
*hosaudionomen.com*

Medverkande: Anna Larsson och Cecilia Jacobsson