



Hur du byter vaxfilter och domen

Med jämna mellanrum eller när du hör sämre med hörapparaterna

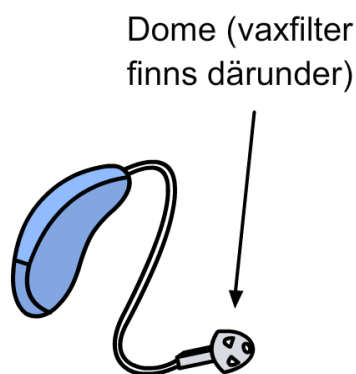


Intro: Vi ska ta av domen för att byta ett så kallat vaxfilter som finns därunder (se bild).


Håll i den grå delen, av metall, **inte** i sladden!

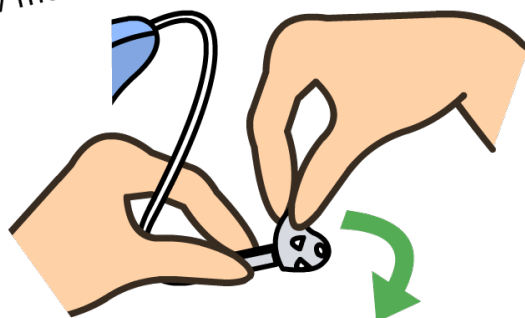


1a. Ta tag i domens "flärp". Dra sedan rakt ut och bänd loss åt sidan samtidigt. Om du inte får grepp om flärpen så prova steg 1b.

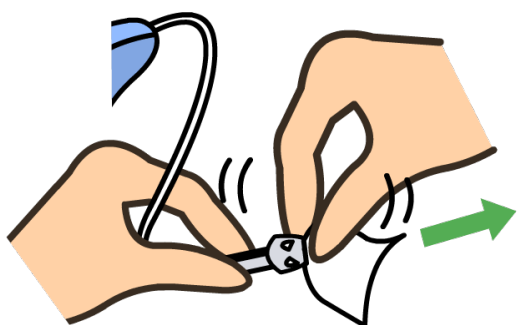


1b. Alternativt ta tag i tippet av domen. Ta tag med en bit papper om du glider. Lirka åt sidorna samtidigt som du drar rakt ut.

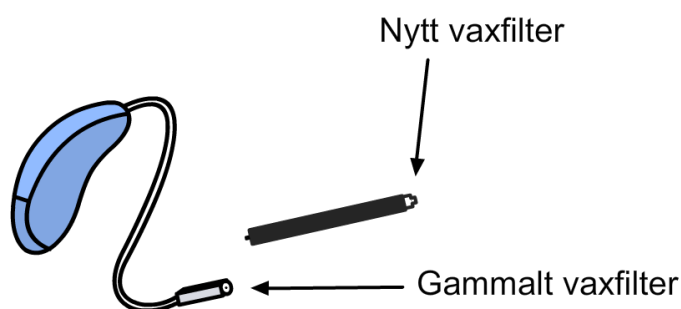


2. När domen är av så tar du fram en "vaxpinne" med ett nytt vaxfilter.

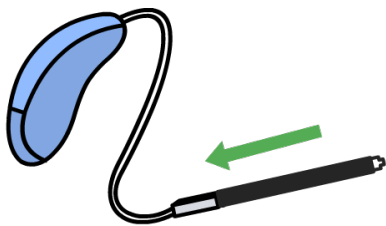


3 För pinnen med *tomma* änden rakt in i hörapparatens gamla vaxfilter.

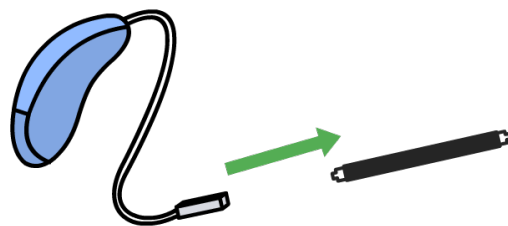


4. Dra sedan rakt ut. Det *gamla* vaxfiltret sitter nu på pinnen.

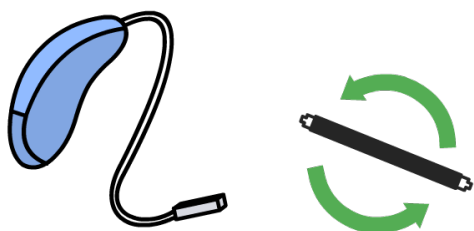


5 Vänd runt pinnen så att du pekar med andra änden mot hörapparaten.

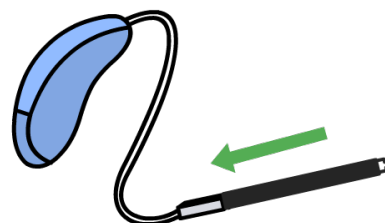

6 Gör samma sak som innan. För pinnen rakt in.

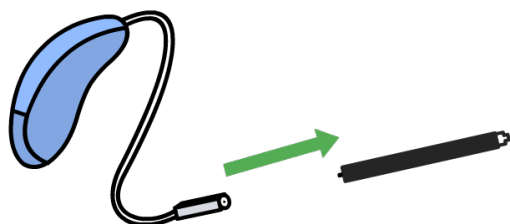

7. Dra sedan rakt ut. Det *nya* vaxfiltret sitter nu på hörapparaten.

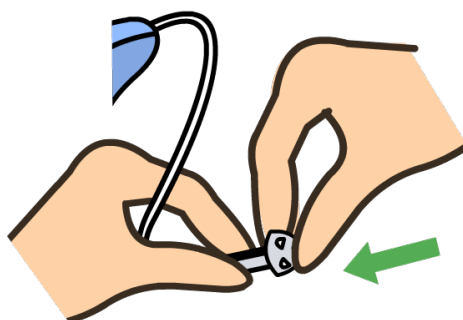

8 Byt dome om den är mer än 2 månader gammal. Tryck den ordentligt rakt in på hörapparaten. **Klart!**