



# FÅ DINA HÖRAPPARATER ATT HÅLLA LÄNGRE!

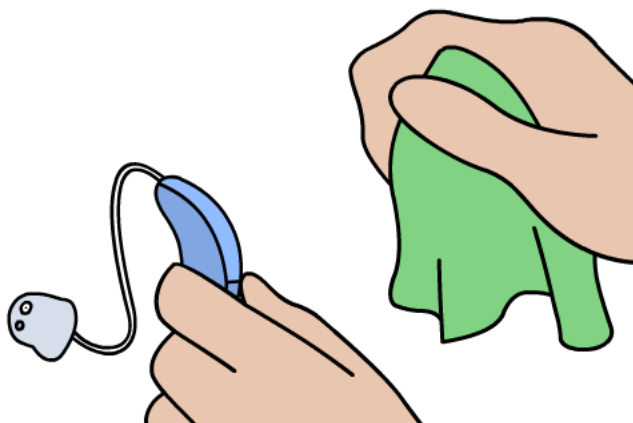

RENGÖR HÖRAPPARATEN  
MINST EN GÅNG I VECKAN  
MED EN TORR DUK.

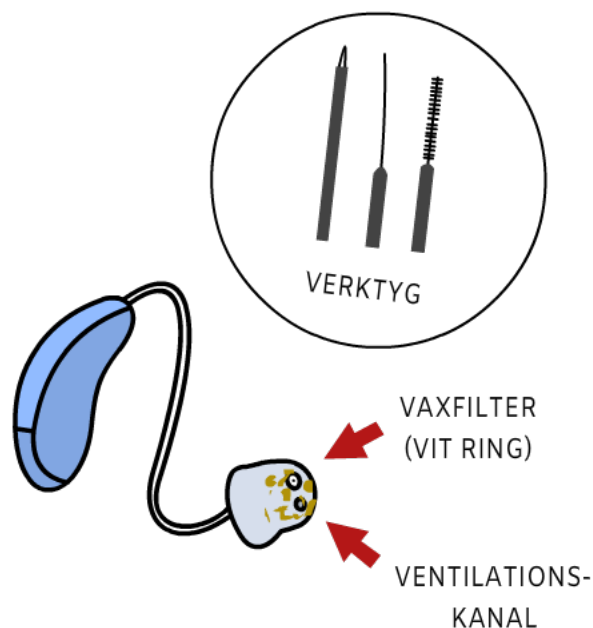


KONTROLLERA **DAGLIGEN** OM  
DET FINNS ÖRONVAX I  
**VENTILATIONSKANALEN**. RENSA I  
SÅ FALL MED VERKTYG. BYT ÄVEN  
**VAXFILTER** OM DÄR FINNS VAX  
(SE NÄSTA SIDA HUR MAN GÖR).




**TORKA HÖRAPPARATERNA** OM  
DE BLIVIT BLÖTA (AV VÄDER,  
SVETT OSV). VET DU MED DIG  
ATT DU HAR FUKTIGA ÖRON?  
KÖP EN **ELEKTRONISK TORKARE**.  
**(OBS: EJ KOMPATIBELT MED  
UPPLADDNINGSBART BATTERI).**


## HUR DU BYTER DITT VAXFILTER

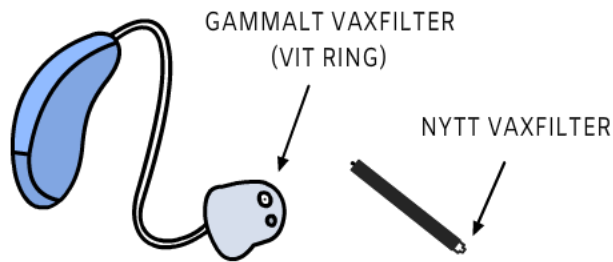


1. TA FRAM EN "VAXPINNE" MED NYTT VAXFILTER.

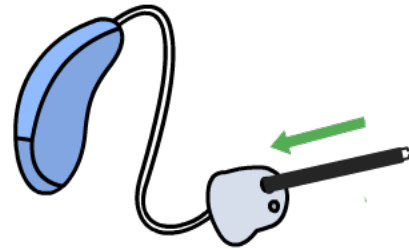

2. FÖR PINNEN MED TOMMA ÄNDEN RAKT IN I HÖRAPPARATENS GAMLA VAXFILTER\*.

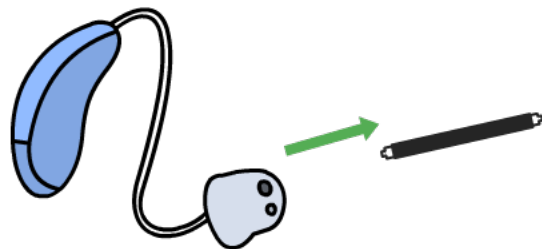


3. DRA SEDAN RAKT UT. DET GAMLA VAXFILTRET SITTER NU PÅ PINNEN.

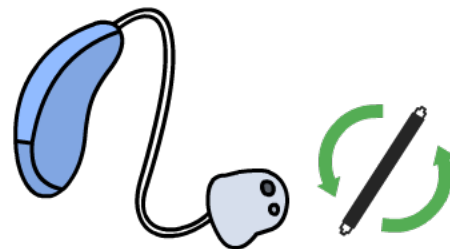

4. VÄND RUNT PINNEN OCH GÖR LIKADANT IGEN - RAKT IN OCH RAKT UT. DET NYA VAXFILTRET SITTER NU PÅ HÖRAPPARATEN!

FLER SÄTT: SAMMA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FAST MED "HÅLLARE" ISTÄLLET FÖR PINNE.

SKRUVA IN PINNEN.

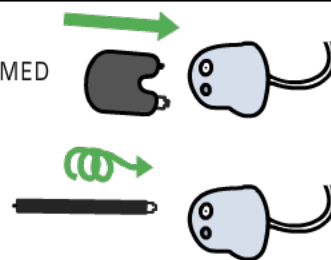

NÅGOT FEL MED HÖRAPPARATEN?



- BYT BATTERI
- BYT VAXFILTRET
- RENSA VENTILATIONSKANAL
- FÖRSÖK PETA IN HÖRAPPARATSDelen I ÖRAT LITE LÄNGRE IN I HÖRSELGÅNGEN.
- HAR DU OFTA VAXPROPPAR? ANVÄND VAXLÖSANDE MEDEL FRÅN APOTEKET ELLER GÅ TILL VÅRDcentral FÖR VAXBORTTAGNING.
- FORTFARANDE PROBLEM? KONTAKTA DIN AUDIONOM.